

DIATHER IMUTEST ALERGIA panel wziewny

Cena: 120,00 zł



Opis słownikowy

Czas dostawy	1-3 dni
Opakowanie	1 test
Producent	DIATHER SP. Z O.O. SP.K.
Rejestracja	
Zastosowanie	Test diagnostyczny

Opis produktu

IMUTEST ALERGIA kot, roztocza, pyłki traw to domowy, kasetkowy test do wykrywania swoistych przeciwciał klasy IgE, skierowanych przeciwko głównemu alergenowi kota (Fel d1), roztoczy kurzu domowego (Dermatophagoides pteronyssinus-główny alergen Der p 1) znajdujący się w roztoczkach kurzu domowego oraz alergenowi g6 (pyłek traw), który obejmuje główne komponenty alergenowe: Phl p 1, Phl p 2, Phl p 5, Phl p 6, Phl p 7, Phl p 12.

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

IMUTEST ALERGIA kot, roztocza, pyłki traw – test wykrywający nadwrażliwość na alergeny roztoczy kurzu domowego, kota oraz pyłków traw.

Alergen g6 jest uniwersalnym markerem do diagnostyki i odczulania chorych z alergią na pyłek traw.

Uzyskane za pomocą testu wyniki są porównywalne z wynikami uzyskanymi za pomocą profesjonalnych metod diagnostycznych (ImmunoCAP). Czułość testu względem referencyjnej metody laboratoryjnej wynosi 97% , swoistość - 100%.

Test można wykonać o każde porze roku. W czasie wykonywania testu nie muszą występować objawy alergii. Przed użyciem produktu nie ma konieczności odstawienia żadnych leków w tym przeciwalergicznym. Za pomocą testu można wykonać badanie u pacjentów w każdym wieku, w tym u małych dzieci. IMUTEST ALERGIA kot, roztocza, pyłki traw zapewnia szybkie wyniki z niewielkiej próbki krwi z nakłucia opuszki palca lub pięty (małe dzieci).

ZASTOSOWANIE

IMUTEST ALERGIA kot, roztocza, pyłki traw to prosty, bezpieczny i dokładny sposób na wykrycie we krwi wysokiego poziomu przeciwciał zwanych immunoglobulinami E (IgE). Wysoki poziom swoistych przeciwciał klasy IgE związany jest ze zwiększoną podatnością na alergię. Niewielka próbka krwi pobierana jest w sposób higieniczny i bezbolesny.

WSKAZANIA DO WYKONANIA IMUTEST ALERGIA kot, roztocza, pyłki traw:

- objawy astmatyczne (świszczący oddech, kaszel, spastyczność oskrzeli)
- kichanie, nieżyt nosa
- swędzące, łzawiące i opuchnięte oczy
- reakcje anafilaktyczne

- alergiczne objawy skórne (pokrzywka, świąd, rumień).

SCHEMAT UŻYCIA

1. otrzymanie próbki krwi za pomocą sterylnego nakłuwacza dołączonego do zestawu
2. pobranie próbki krwi za pomocą kapilary dołączonej do zestawu
3. wprowadzenie pobranej próbki krwi do oznaczonego mniejszego okienka w kasecie testowej
4. wprowadzenie odczynnika do większego okienka w kasecie testowej
5. odczekanie 15 minut i odciągnięcie niebieskiego suwaka w kasecie testowej
6. odczytanie i interpretacja wyniku

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- 1 saszetka z testem kasetkowym
- 1 sterylny nakłuwacz
- 1 kapilara
- 1 odczynnik
- instrukcja użycia.

Podmiot odpowiedzialny:

DIATHER

Petrusewicz Sp. K.

Ku Ujściu 19


80-701 Gdańsk

Galeria

Zawartość zestawu



Schemat użycia

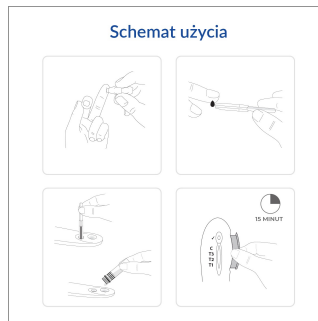

Interpretacja wyników

